

O que preciso para uma operação? Que componentes precisam ser esterilizados?



Unidade de ultrassom SonicWeld Rx®


- Cabo de alimentação do respetivo país
- Peça de mão incluindo cabo (esterilizada)



- Pontas de sonotrodo (esterilizadas)




- Chave de boca para sonotrodos (esterilizada)

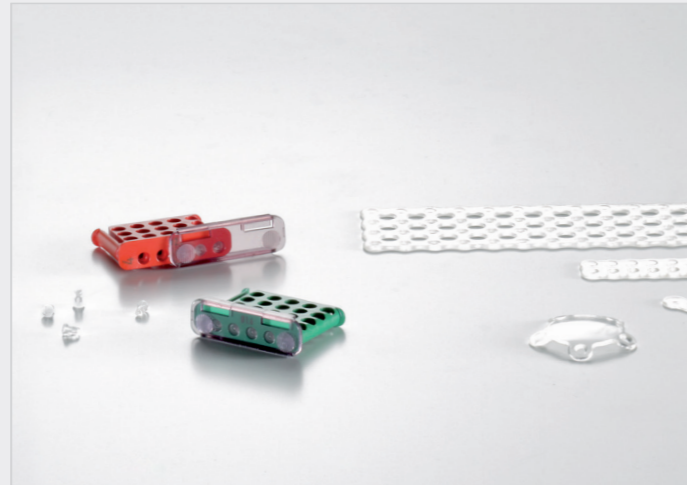

Implantes reabsorvíveis do Grupo KLS Martin


- Placas Resorb x/xG, malhas, membrana estéreis

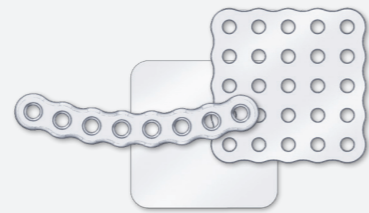

- SonicPins Rx® estéreis

Ø 1,6 mm

Ø 2,1 mm

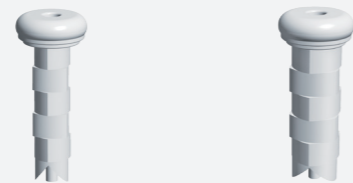

Banho-maria Xcelsior*

- Cabo de alimentação do respetivo país
- Cobertura (esterilizada)



- Recipiente de água (esterilizado)



* Outros dispositivos térmicos ainda não foram testados quanto à sua adequação e, por isso, não devem ser utilizados.




Broca BOS

- Peça de mão (esterilizada)




- Conjunto de pilhas descartáveis estéreis

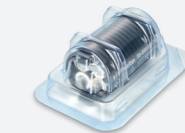

- Broca (esterilizada)*

Ø 1,6 mm

Ø 2,1 mm

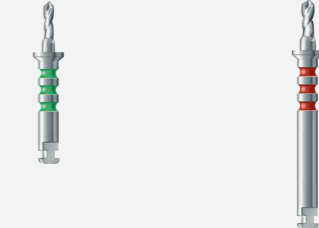

* Outras brocas ainda não foram testadas quanto à sua adequação e, por isso, não devem ser utilizadas.